


**Návod k použití
Fotonová terapie – Infračervené světlo
SD-956IR**



**UPOZORNĚNÍ: ČTĚTE POZORNĚ
NÁVOD K OBSLUZE**

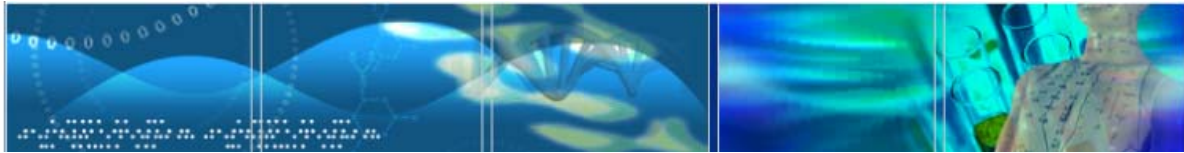

Představení výrobku

Projekt osobní péče o pleť

Potíže s pleť jsou způsobené mnoha faktory, které mají souhrnné působení. Jsou to například: znečištěné životní prostředí, dieta, dlouhodobé používání kosmetických přípravků, životní styl a zvyšující se stres. Kombinací

nejnovějšího výzkumu o péči o pleť a moderní technologie, série produktů Photon Beauty je bezpečná a efektivní pro všechny druhy pleti.



Co je Fotonová terapie – infračervené světlo?



- Fotonová terapie je založená na použití přírodního světelného vlnění vyzářeného do pleti. V závislosti na použité vlnové délce, světlo je cíleno buďto na hemoglobin ve škáře nebo na melanin v pokožce. Specifický cíl je zahříván a zničen, tímto vás zbaví nechtěné hyperpigmentace nebo přerušených krevních cévek. Tepelný účinek generovaný přístrojem Photon Beauty zvyšuje lokální metabolismus a krevní oběh, tím stimuluje přirozené formování kolagenu. Tyto příznivé buněčné a metabolické efekty odstraní skvrny stárnutí a tmavé pigmenty, odstraní přerušené krevní cévky, pomohou zjemnit linky a vrásky, zanechají vaší pleť hebkou a lesklou.
- Photon Beauty pomáhá oživovat buňky, zvyšuje krevní oběh, zlepšuje zásobování kůže kyslíkem, posiluje pleťové tkáně a zlepšuje látkovou výměnu použitím přirozených světelných vln, které přenáší do kůže, aktivuje buňky citlivé na světelnou energii, kde energie je absorbovaná byhemoglobinovými proteiny, karbohydráty a tuky a tím dochází ke zlepšení stavu vaší kůže

Funkce a vlastnosti



Funkce

- Proti vráskám
- Vylepšuje krevní oběh, zajišťuje rovnováhu pleti
- Předchází vytváření melaninových pigmentů
- Zpevňuje kůži
- Vyhlazuje díry a zmírňuje jizvy
- Pomáhá proti akné a zánětům kůže

Vlastnosti


- Infračervené paprsky: prostoupí až 10 mm hluboko do kůže
- Malý výkon: nepotřebuje chladící médium
- Kontrola teploty: zahřátý a komfortní
- Nízká hmotnost: jednoduchý na přenos a použití v jakékoliv době
- Vhodný: pro všechny typy pleti

Bezpečnostní informace

1. Abyste se vyhnuli úderu elektrickým proudem a možného zničení přístroje, nepoužívejte Photon Beauty v blízkosti zdroje vody, u bazénu, ve vaně, u umyvadla plného vody apod. Nepoužívejte také v příliš vlhkém prostředí, jako je např. sauna apod.
2. Nepoužívejte Photon Beauty na vlhké části na těle. Používání na vlhkých částech těla může způsobit vážné popáleniny.
3. Děti a mentálně postižení nesmí přístroj používat bez vhodného dozoru
4. Teplota přístroje je dostatečně vysoká na to, aby mohla při nesprávném použití způsobit popáleniny. Nepoužívejte na zanícené, zarudlé nebo na poraněné kůži. Nepoužívejte na invalidních osobách, osobách, které spí nebo jsou v bezvědomí.
5. Nedržte ani netlačte přístrojem na části těla, kde zahřívání a tlak začíná být bolestivý.
6. Používejte přístroj Photon Beauty PŘED aplikací krému a určitých kosmetických přípravků. NEPOUŽÍVEJTE na místech, kde již byly tyto kosmetické přípravky aplikovány. Před použitím Photon Beauty pečlivě umyjte a vysušte části na těle, kde byly použity některé kosmetické přípravky.
7. Neaplikujte na ty části těla, které byly nedávno ozařovány či podobně léčeny, popř. na části, které jsou spálené či podrážděné slunečním zářením.
8. Neaplikujte na hlavu, oči či jiné citlivé části těla. Před použitím na křečové žíly se poraďte se svým lékařem či jiným odborníkem. Pokud máte nějaké pochybnosti ohledně vhodnosti použití přístroje na určité obtíže, obraťte se opět na svého lékaře či jiného odborníka.
9. Přestaňte přístroj okamžitě používat, pokud zaznamenáte na kůži změnu barvy v důsledku používání přístroje.

10. Nepoužívejte ve vodě nebo v její blízkosti.
11. Nepoužívejte Photon Beauty na bolavém břichu. Použití na bolavém břichu může způsobit určité komplikace. Pokud bolest přetrvává, kontaktujte vašeho lékaře
12. Nepoužívejte Photon Beauty na oblast očí. Použití na oblast očí může způsobit vážné popáleniny. Nedívejte se do červeného světla vycházející z přístroje.
13. Nepoužívejte na oblasti těla s malou cirkulací krve
14. Absolutní zákaz používání lidem s kardiostimulátorem a implantáty

Popis přístroje

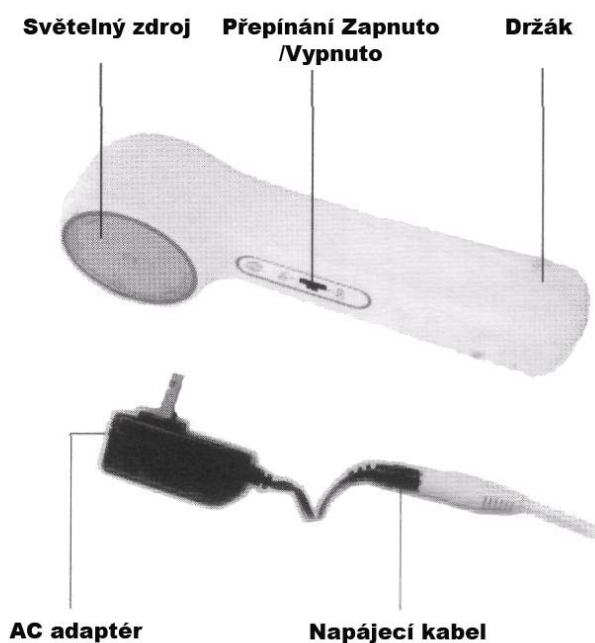

Produkt zahrnuje:

- Přístroj Photon Beauty x 1
- AC adaptér x 1
- Návod k obsluze x 1
- Obal – krabice x 1

Instrukce k použití


1. Umyjte a utřete si obličej



2. Zapojte jeden konec el. kabelu do spodní části přístroje a druhý konec do zásuvky 230V.




3. Jakmile přístroj zapojíte, zapněte přepínací tlačítko a světelný zdroj začne zářit

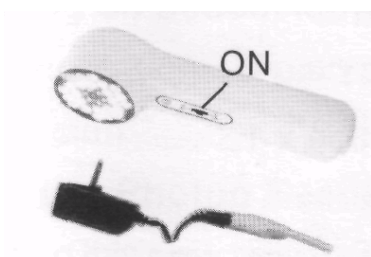

4. Přístroj obsahuje zabudovaný automatický vypínač, který přístroj po 10-ti minutách vypne. Vypnutí je signalizováno 2x pípnutím. Chcete-li v užívání pokračovat, znovu přístroj zapněte.
5. Užívejte takto: Jemně držte přístroj Photon Beauty blízko pokožky a masírujte. Na každou oblast cca 10 minut, maximálně však 30 minut na jednom místě.



6. Přístroj po použití vždy vypněte a uložte na vhodné místo.

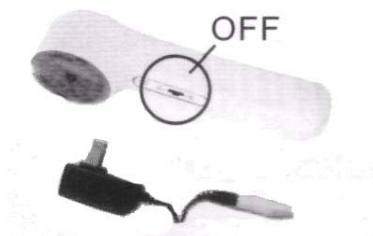

Údržba

1. Před čištěním se ujistěte, že napájecí kabel je rozpojený a přepínač je v pozici „OFF“
2. Čistěte přístroj Photon Beauty suchým hadříkem a nepoužívejte vodu ani žádné čisticí přípravky.
3. Pokud přístroj čistíte, nevytahujte světelný filtr, abyste nezpůsobili vnitřní poškození.
4. Vyvarujte se pádu přístroje, velkému tlaku a poškrábání
5. Netahejte za napájecí kabel
6. Nerozebírejte přístroj
7. Po použití skladujte v krabici a v suchu.



Technické údaje

Napájení přístroje	Síťový adaptér 230V AC / 15V DC
LED	24 neviditelných infra LED, 6 viditelných červených LED
Oblast expozice	3,5cm/1.4"
Časovač:	Automatické vypnutí po 10ti minutách
Přepínač	ON/OFF
Hmotnost	162 g
Rozměry:	16 x 3 x 5 cm

Otázky a odpovědi

- **Jsou pro použití Photon Beauty vhodné všechny typy pleti?**

Ano. Díky našemu výzkumu jsme zjistili, že pulzní světelná terapie se hodí pro všechny lidi a všechny typy pleti.

- **Je cítit nějaká bolest při použití Photon Beauty?**

Nikdy. Pokud používáte Photon Beauty na kůži, můžete pocítit jemné brnění nebo zahřívání. Nicméně, tento pocit by nikdy neměl být bolestivý nebo nepříjemný. Pokud se objeví určitá bolest, přestaňte přístroj používat.

- **Které látky by mohly mít za následek kvalitativní změny se světlem?**

Látky, které jsou reaktivní se světlem, jako například vitamin C by mohl způsobit kvalitativní změny.

- **Jak dlouho bude trvat, než uvidím změny v mojí pokožce?**

Problémy s pletí	Čas, za jaký jsou vidět výsledky
Omlazení pleti	Několik dnů – několik týdnů
Protizánětlivý účinek	Několik dnů – několik týdnů
Kontrola a léčba zanícení	Několik minut – několik hodin
Zlepšený oběh krve	Několik minut
Uvolnění napjatých svalů	Několik minut – několik dní
Regenerace pleťových buněk	Několik dní

- **Můžu přístroj používat, když mám citlivou pleť, růžovku nebo zlé akné?**

Ano. Nicméně, Photon Beauty by měl být udržovaný v nepatrné vzdálenosti od kůže

- **Můžu používat Photon Beauty i když mám make up?**

Toto není doporučeno

- **Jaké jsou vlastnosti přístroje Photon Beauty?**

- Nový přístup k léčbě akné.
- Malá intenzita a úzké spektrum obnovuje kůži.
- Krátká doba léčení, s více než 4 týdny léčení dosáhnete úchvatné výsledky.
- Žádné postranní efekty, žádná bolest.
- Vhodný pro všechny oblasti na těle, zahrnující i oblast s vousy.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno

ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

☎ 549 245 575; 602 766 759

CE0434

Photon Beauty SD-956IR byl certifikován jako zdravotnický prostředek třídy IIa. Schválení provedla notifikovaná osoba č.0434: DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS VERITASVEREN1, 1322 HOVIK, NORWAY

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

According to the Medical Device Directive : 93/42/EEC.


The undersigned, **George Chiang**, representing **Skylark Device & Systems Co., LTD.**; 2F-9, 40-2, Sec. 1, Ming Shen N.Rd., Kui Shan, Tao Yuan, Taiwan, R.O.C.; manufacturer, declares that the equipment described hereafter :

Photon Therapy Device

Provided that it is used and maintained in accordance with the generally accepted cords of good practice and the recommendations of the instructions manual, meets the essential safety and health requirement of the Medical Device Directive.

For the most specific risks of this equipment, safety and compliance with the essential requirement of the Directive has been based on elements of :

- the European Standard EN 60601-1 : 1990 - Safety of medical device; Electrical equipment - General safety.
- the European Standard EN 60601-1-1 : 1993 - General requirement for safety - Collateral standard : Safety requirements for medical device.
- the European Standard EN 60601-1-2 : 1993 - General requirement for safety - Collateral standard : Electro-magnetic compatibility-Requirements and tests.
- the European Standard EN 46001 : 1994-Quality systems-Medical device-Particular requirements for the application of EN 29001.
- the European Standard EN 29001 : 1994-Quality System-Model for quality assurance in design/development, production, installation, and servicing.

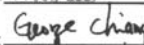Date : 14 July 2009
Signature : 
Qualification : President/George Chiang

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE 034

Podle směrnic pro zdravotnické prostředky: 93/42/EEC

Níže podepsaní, **George Chiang**, reprezentující **Skylark Device & Systems Co., LTD.**; 2F-9,40-2, Sec. 1, Ming Shen N.Rd., Kui Shan, Tao Yuan, Taiwan, R.O.C.; výrobce prohlašuje, že zařízení popsané dále:

Fotonové terapeutické zařízení

Za předpokladu, že je přístroj užíván a udržován v souladu s obecně uznávanými pravidly o správném použití a doporučení v návodu k obsluze, splňuje základní bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnic pro zdravotnické prostředky.

Pro největší specifická rizika tohoto zařízení, bezpečnost a vyhovění základních požadavků směrnic byly založeny na standardech:

- evropská norma EN 60601 -1 : 1990 - bezpečí zdravotnických zařízení; Elektrické příslušenství - Všeobecné bezpečí.
- evropská norma EN 60601 - 1 - 1 : 1993 - všeobecné ustanovení pro bezpečí -vedlejší standard : Bezpečnostní požadavky pro zdravotnické zařízení.
- evropská norma EN 60601 - 1 - 2 : 1993 - všeobecné ustanovení pro bezpečí -vedlejší standard : Elektromagnetická kompatibilita požadavky a testy.
- evropská norma EN 46001 : 1994 – Kvalitní systémy- zdravotnické zařízení- zvláštní požadavky pro použití normy EN 29001.
- evropská norma EN 29001 : 1994 - Kvalitní systémový model pro zajištění jakosti v oblasti designu/vývoj, produkce, instalace, a servis.

Datum : 14 červenec 2009
Podpis :
Kvalifikace : Prezident/George Chiang