

UD-039A

Návod na použití


PRINCIP FUNKOVÁNÍ:

Tento produkt pracuje se dvěma 2MHz transdukčními plátkami. Na základě ultrazvukového principu a využití elektrického proudu dochází ke kompresnímu efektu v usměrněném okruhu. Ocelové plátky generují 25kHz vysokofrekvenční vibrační vlny, které pomáhají docílit pomocného efektu při používání jiných produktů. Tento produkt Vám může pomoci ke kráse a čistotě Vaší pleti.



Účinek:

1. Tato vibrační vlna je silná a má vysokou energii. Její použití v oblasti tváře může kožní buňky rozvíbrovat, čímž dochází také k jemnému masážnímu efektu. Ti pomáhá nastartovat metabolismus, aktivovat kožní buňky a pomáhá efektivní absorpci živin do pokožky.
2. Ve spolupráci s přípravky k péči o pleť a díky vysokofrekvenčním vibracím jsou špína a toxiny usazené v pokožce a stárnoucí kůže odstraněny tzv. Pulverizací, která pomáhá udržovat Vaši pokožku čistou.


JEDNOTLIVÁ TLAČÍTKA

1. ON/OFF tlačítkem přístroj zapínáte.
2. Tlačítkem VOL vybíráte funkce.
3. P je kontrolka pro aktivitu přístroje.
4. L je kontrolka pro nízkou intenzitu.
5.  je kontrolka pulsování.
6. H je kontrolka pro vysokou intenzitu.

Procedura ošetření:

1. Vyčistěte pleť celé tváře.
2. Pořádně navlhčete celou tvář buď vodou nebo kosmetickým přípravkem.
3. Nejdříve odejměte kryt hlavice;
4. Zapněte přístroj (tlačítkem ON/OFF), rozsvítí se kontrolka "P". Přístroj začne pracovat.
5. Po startu bude nastavená hodnota "L"
6. Tlačítkem VOL nastavíte intenzitu;
 - (1) L nízká
 - (2)  pulsní +L(nízká)
 - (3) H vysoká
 - (4)  pulsní + H(vysoká)
7. Přiložte přístroj k tváři pod úhlem 45° a pomalu ním přeježdějte po tváři směrem ven rychlostí zhruba 1-2 cm/s.


Z tváře se vám bude voda, kterou byl pleť navlhčena jemně mížit. Pokud k tomuto úkazu nedojde, tvář není dostatečně navlhčená a měli byste ji dovlhčit.

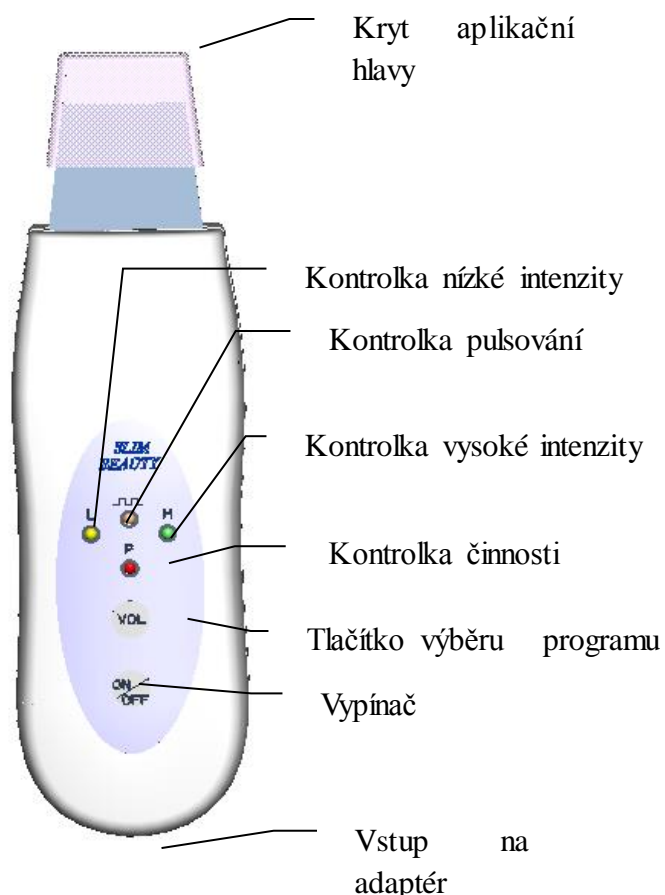

8. Pro čištění pórů, pupínků, akné a vrstvy stratum corneum držte přístroj tak, jak je znázorněno na obrázku níže a pohybujte ním směrem od středu tváře k jejím okrajům.



9. Pro masáž tváře držte přístroj tak, jak je znázorněno na obrázku níže a pohybujte ním směrem od středu tváře k jejím okrajům.

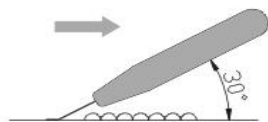

10. Po ukončení čištění odstraňte z tváře nečistoty omytím teplou vodou.


11. Pokud se vybíjí baterie, alarm Vám to oznámí

Pěti pípnutími. Kontrolka bude zároveň blikat.

Po pěti zapípáních se přístroj automaticky vypne.

12. Přednastavený čas ošetření je deset minut. Po uplynutí tohoto času přístroj dvakrát zapípá a poté se automaticky vypne.

13. Průběhu nabíjení, L —  — H blikají.

14. Když je přístroj nabitý, L —  — H nepřetržitě svítí.

Upozornění

1. Před a po použití produkt vždy vyčistěte alkoholem.
2. Pokud trpíte kožní infekcí, přístroj nesdílejte s jinými osobami.
3. Hlavici chraňte před nárazy
4. Nenechávejte hlavici na jednom místě déle než 3 vteřiny, přístrojem kontinuálně pomalu pohybujte. Pokud ucítíte nepříjemný pocit, okamžitě změňte místo aplikace.
5. Nepoužívejte v blízkosti očí a zranění.
6. Po čtyřhodinovém nabíjení vydrží přístroj pracovat 2 hodiny.
7. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, dejte ho jednou měsíčně nabíjet, Prodloužíte tak jeho životnost.

Produkt nepoužívejte v těchto případech:

1. Pokud trpíte srdeční poruchou nebo máte kardiostimulátor
2. Pokud jste těhotná
3. Pokud právě menstrujete
4. Pokud jste mladistvý

Elektrické parametry

1. Adaptér: VSTUP:100-240VAC,50/60HZ VÝSTUP:5.5VDC500MA
2. Baterie: 3.7V/850MAH
3. Max. napětí: 1.5W \pm 10%
4. Životnost: 3 roky
5. Doba nabíjení: 3 hodiny