


Polštářek na krk MC0133

Návod k použití

Polštářek na krk pomáhá odstraňovat bolest krku a zlepšovat cirkulaci krve. To vše pomocí 4 silných a výkonných magnetů. S příjemnou masáží o deseti minutách denně předchází únavě krčního svalstva.

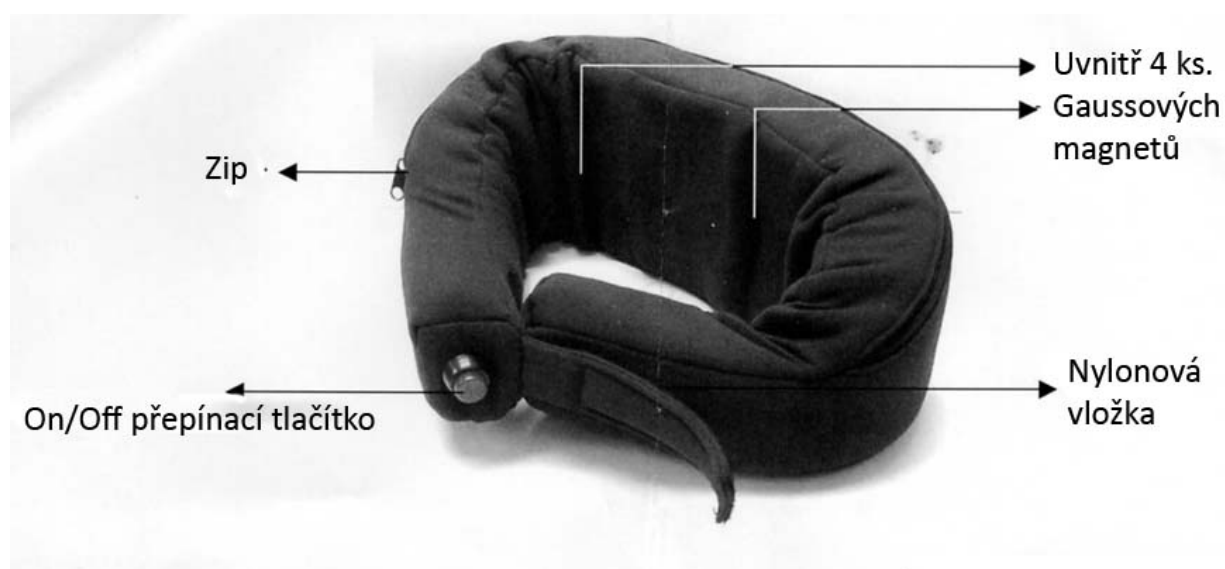

Jak s přístrojem pracovat

1. Otevřete zip a uvidíte přihrádku na baterie. Vložte dvě AAA baterie. Dodržujte předepsanou polaritu.
2. Po instalaci baterií zavřete zip.
3. Nasadte polštářek na krk a přizpůsobte nylonovou vložku na velikost vašeho krku.
4. Zmáčkněte červené tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje.

Důležité

- Polyesterovou pokrývku neperte v pračce. Pouze ji očistěte haděrkou.
- Jestliže přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

- Jestliže se během používání přístroje začnete cítit nepohodlně, okamžitě přístroj vypněte a kontaktujte svého lékaře.

Technické specifikace

Název modelu : Neck Care

Model číslo : MC0133

Napájení : 2 AAA baterie

Velikost přístroje : 66 * 11 * 5 cm



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Compex spol.s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno

Tel: 549 245 575, 602 766 759