

Vyhřívané podložky HOME CARE

HT 703



Návod k použití

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tuto vyhřívanou podložku Home Care.

Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nerespektováním pokynů uvedených v tomto návodu.

Tento návod k použití obsahuje nejnovější popis a pokyny k použití tohoto přístroje. Výrobce si však vyhrazuje právo změny technických parametrů, vlastností a tiskových chyb.

Základní vlastnosti a informace o produktu

Vlhčené, elektricky vyhřívané podložky Home Care, jsou navrženy pro maximální využití účinků hot&cold terapie (terapie teplem a chladem). Naše speciální hydro-gelové podložky mohou být nahřány elektrickou nahřívací jednotkou nebo ochlazeny v mrazničce, ale stále si zachovávají svou flexibilitu, aby se mohly dokonale vytvarovat pro určenou část těla a poskytnout tak neustálý komfort. Je obecně známo, že vlhčené teplo je více účinné než suché teplo, díky schopnosti hlouběji prostupující tepelné terapie. Naše hydro-gelová podložka absorbuje a udržuje vlhkost ze vzduchu, a pomalu jej uvolňuje při zahřívání. Vysílá pak vlhké teplo skrz omyvatelný 100% bavlněný obal do tkání, které leží pod povrchem Vaší kůže. Hot&Cold terapie zahrnuje široké spektrum léčby pro řadu potíží a onemocnění.

Vyhřívané podložky Home Care jsou skládací, a byly speciálně navrženy tak aby vytvářely vlhké/suché prostupující infračervené teplo, tak jako chlazení po umístění v mrazničce. Podložky jsou ve škále rozličných tvarů a velikostí pro speciální terapii.

Bezpečnostní pokyny

- 1) Pokud je nahřívána podložka příliš horká, SNIŽTE PROSÍM NASTAVENOU TEPLOTU A NECHTE PODLOŽKU VYCHLADNOUT NA TEPLOTU PŘÍJEMNOU PRO POUŽITÍ.
- 2) Podložka NENÍ určena pro nahřívání ve vroucí vodě.
- 3) Důkladně prosím kontrolujte teplotu podložky, zvláště při použití podložky pacienty a dětmi.
- 4) Pokud používáte podložku se speciálně vysokou teplotou pro tepelnou terapii, ujistěte se, že podložka nebude na kůži příliš dlouhou dobu.
- 5) Pokud podložku ochlazujete v mrazničce, ujistěte se, že je odpojena od ovladače a uložte ji do plastického sáčku. (Bez časového limitu).
- 6) Pokud měníte různé tvary podložek, ujistěte se, že kabelový konektor je kompletně upevněn.
- 7) Vždy používejte specifické doplňky doporučené návodem. Použití jiných součástí, které nejsou schváleny výrobcem mohou způsobit poškození.
- 8) Tento přístroj je v záruce po dobu 1 roku od data nákupu kupujícího.
- 9) Skladní životnost přístroje jsou 3 roky (vyjma podložek).
- 10) Produkt vyhovuje požadavkům elektromagnetické kompatibility EN60601-1-1-1-2, jak je specifikováno v EEC směrnici 93/42/EEC.
- 11) Provoz přístroje v blízké vzdálenosti (např. 1 m) od zařízení s mikrovlnnou terapií může způsobit nestabilitu ve výkonu stimulatoru. (IEC601-2-10).

- 12) Udržujte přístroj čistý a v suchu, prostředí úschovy/provozu/přepravy se musí nacházet v rozmezí mezi -10°C do 70°C pod 90% relativní vlhkosti.

Popis částí ovladače



Použití

1) Před použitím se ujistěte že údaje o výkonu elektricky vyhřívání podložky jsou v souladu s příslušným domácím napájením.

2) Před použitím zapojte AC přívod energie, přístroj zjistí výstupní obvod a signalizační zařízení dvakrát zasignalizuje, LCD světlo se zapne po dobu 3 sekund a objeví se na něm „-“, což znamená že přístroj je připraven. Poté stiskněte tlačítko „on/off“ pro zapnutí přístroje.

- Pokud zapojení do obvodu není v pořádku, přístroj nemůže být zapnut a po stisknutí tlačítka „on/off“ zazní 3-krát signalizující alarm a LCD displej zobrazí „open“.

- Pokud je zapojení do obvodu bez viditelného problému (propojení jsou v pořádku, kabely nejsou poškozeny), ale zapnutí přístroje pomocí tlačítka „on/off“ stále nefunguje, přístroj odpojte od zdroje a reklamujte výrobci.

- Po zapnutí přístroje stisknutím tlačítka „on/off“, se přístroj automaticky zapne do přednastaveného režimu (teplota 40°C, časovač 30 min.) pro začátek nahřívání, LCD displej rovněž zobrazí teplotu vyhřívání podložky.

- Přístroj obsahuje technologii PID kontroly; rovnoměrného nahřívání, která zapojí a dodá tepelný výkon rovnoměrně. Teplota vyhřívání podložky bude na všech místech stejná, bez míst příliš či málo horkých.

3) Po zapnutí přístroje můžete přikontrolovat nastavení údajů. Pro nastavení teploty jedenkrát stiskněte tlačítko „mode“ a zadejte požadované nastavení teploty.

4) Pomocí tlačítek „up“ nebo „down“ nastavte požadovanou hodnotu teploty a poté jedenkrát stiskněte tlačítko „mode“, čímž se dostanete do nastavení časovače.

5) Pomocí tlačítek „up“ nebo „down“ vyberte hodnotu nastavení časovače a poté jedenkrát stiskněte tlačítko „mode“, přístroj uloží nastavení a začne nahřívání vyhřívání podložku.

6) Jakmile časovač odpočítá na nulu, spustí se připomínající alarm, a přístroj se automaticky vypne.

- Nastavené údaje můžete kdykoli přikontrolovat stisknutím tlačítka „mode“, čímž se opět dostanete do režimu nastavení. Pokud přístroj nezačnete nastavovat po dobu 5 sekund, přístroj se bez změny automaticky vrátí do aktuálního nastavení.

- Nastavení teploty je možné v rozmezí od pokojové teploty po 70°C. Pokud je výběr teploty vyšší než 60 °C, na LCD displeji se objeví ikonka „high“ a alarm bude pro připomenutí signalizovat vysokou teplotu každých 5 sekund, v zájmu ochrany proti opaření.

- Pokud nastavujete vysokou teplotu pro speciální léčbu, dávejte zvýšený pozor na délku terapie, která by neměla trvat příliš dlouho.

- Pokud potřebujete využívat léčbu vlhkem po delší dobu, využijte prosím speciální „hydro-glycerinovou gelovou podložku“, která je vhodná pro dlouhotrvající vlhkost. Pro tuto proceduru prvně otevřete vnější bavlněný obal a vnitřní obal a poté gelovou podložku vložte mezi nahřívací podložku a vnitřní látkový obal.

- Poté, co přístroj zapnete a teplotní rozdíl mezi nahřívací podložkou a nastavenou teplotou je příliš velký, rovněž přidejte gelovou podložku, čímž snížíte čekací čas pro nárůst teploty. Stiskněte prosím tlačítka „up“ a „down“ současně po dobu 2 sekund pro zapnutí režimu zrychleného nahřívání (zobrazení „instant“ a „high“ na displeji). Tento režim (s max. nahřívacím výkonem) bude nahřívání podložku po dobu 5 minut od spuštění.

- V průběhu zapnutého režimu zrychleného nahřívání bude LCD displej zobrazovat ikonky „instant“ a „high“. Pokud teplota vlhčené nahřívací podložky přesáhne hodnotu nastavení požadované teploty a režim rychlého nahřívání stále pokračuje, stiskněte prosím tlačítka „up“ a „down“ současně po dobu 2 sekund, čímž tento režim vypnete, a

umožníte tak teplotu klesnout na požadovanou a zabráníte nebezpečí popálení pokožky.

• **UPOZORNĚNÍ:** Pokud nepřiložíte do obalu základní vložky vložku gelovou, zásadně režim zrychleného nahřívání nezapínejte, protože by teplota mohla stoupnout příliš vysoko a popálit tak pokožku.

• Pro dosažení nejlepších výsledků s vlhkou podložkou, doporučujeme po několika použitích gelovou podložku ponořit na minutu do vody. Poté osušte přebytečnou vodu z podložky ručníkem.

• Stav nahřívání můžete zjistit z chování světla LED žárovky. Když je doba zsvícení kratší, znamená to že nahřívací výkon je malý, a naopak při delší době je nahřívací výkon větší. Momentální výkon lze poznat i z intenzity osvětlení LCD displeje.

• Pokud je po zapnutí přístroje teplota nahřívané podložky vyšší než nastavená teplota, LED žárovka bude vypnutá ale LCD displej bude ukazovat teplotu podložky, dokud se teplota dostatečně nesníží a poté začne opět nahřívát.


• Možnost nastavení časovače je v rozmezí od 1 do 99 minut.

• Možnost nastavení výběru teploty je v rozmezí od 20°C do 70°C (Pokud je vybraná teplota nižší než pokojová teplota, přístroj zůstane zapnutý, ale nezačne podložku nahřívát).

• V případě že potřebujete zastavit přístroj během provozu, stiskněte tlačítko „on/off“ po dobu 2 sekund pro vypnutí přístroje, nebo pokud přístroj nereaguje na stisknutí, odpojte jej ze zásuvky. Pokud potřebujete přerušit chod přístroje pouze na krátkou chvíli, ale stále ještě chcete využít tepelnou terapii, můžete přístroj vytáhnout ze zásuvky, protože nahřívání podložka udrží svou teplotu po více než 30 minut.

• Pokud se během chodu přístroje stane cokoli nepřírozeného, vypněte prosím přístroj stisknutím tlačítka „on/off“ po dobu 2 sekund (pokud přístroj nereaguje, odpojte jej prosím ze zásuvky a opět zapojte).

Aplikace

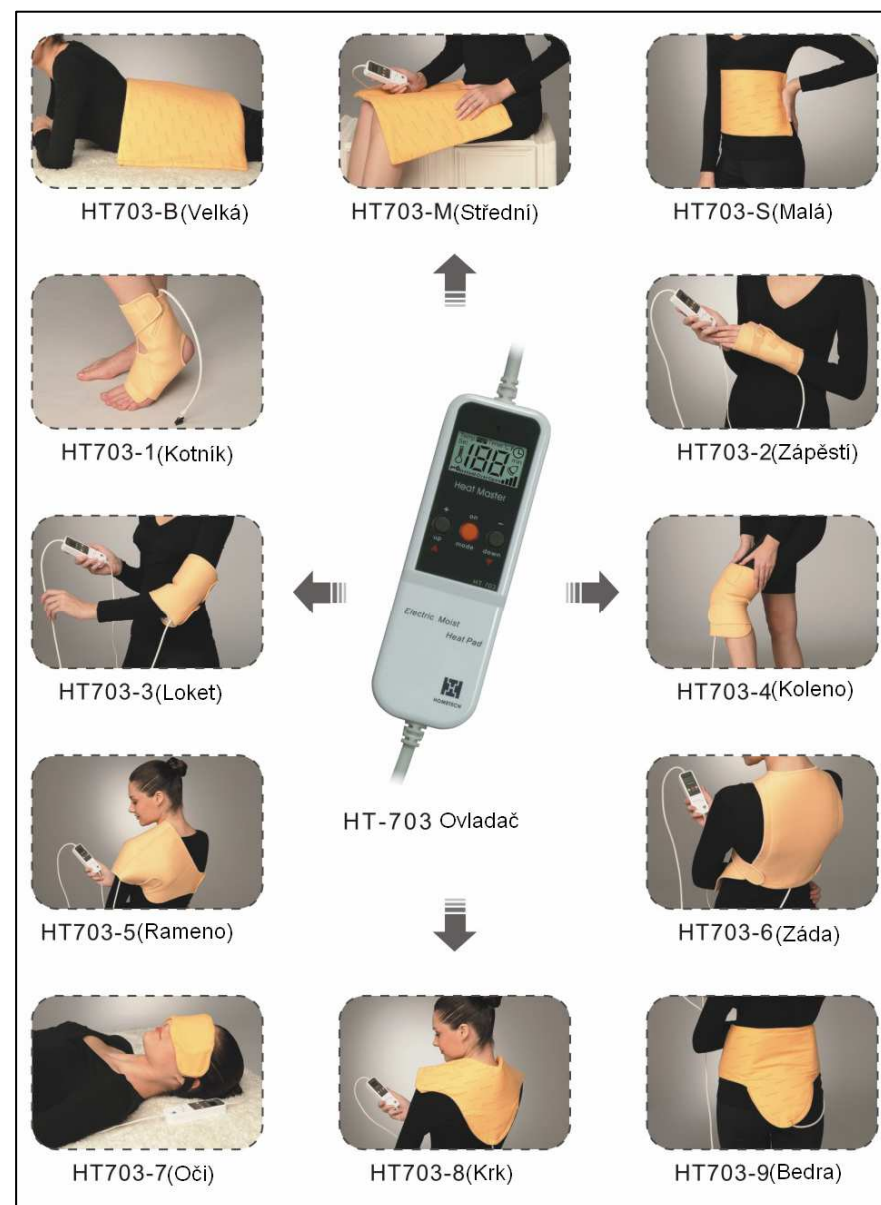

Řešení potíží s přístrojem

Závada	Možný důvod závady	Postup pro odstranění závady
Nenahřívá	● Kabelová přípojka má uvolněný kontakt, nebo špatný kontakt	● Zkontrolujte a dokonale upevněte přípojku
	● Nastavená teplota nahřívání je nižší než pokojová teplota	● Zvyšte nastavenou teplotu
	● Přístroj není zapojen do obvodu	● Zapojte do sítě
	● Předchozí nastavení	● Změňte předchozí nastavení
	● Nahříváč je poškozený	● Vyměňte nahřívací podložku
	● Kabel přístroje je poškozený	● Kontaktujte prodejce
Přerušované nahřívání	● Uvolněné spojení na ovladači nebo na podložce	● Znovu zapojte a ujistěte se, že je jednotka bezpečně připojena
	● Špatné nastavení teploty	● Snižte nebo zvyšte nastavenou teplotu a znovu si přečtěte návod na nastavení teploty ● Kontaktujte prodejce
Vypnutý přístroj se nedá zapnout	● Teplota podložky je pod 10°C	● Počkejte až se teplota podložky zvýší, poté znovu zapojte
	● Nadměrný tlak na nahřívací podložku nebo na senzor	● Uvolněte tlak na podložku, nebo vyměňte nahřívací desku
	● Nestandardní nastavení el. sítě	● Překontrolujte nastavení el. sítě
	● Nahříváč se dostal do styku s vodou	● Vysušte nahřívací podložku
	● Nahříváč je poškozený	● Vyměňte za novou nahřívací podložku
	● Kabel je poškozený	● Kontaktujte prodejce
	● Kabel je krátký	● Přiblížte přístrojovou jednotku ke zdroji
	● Defektní přístroj	● Kontaktujte prodejce

Závada	Možný důvod závady	Postup pro odstranění závady
Alarm	● Použití vysoké teploty	● Snižte nastavenou teplotu
	● Teplota zahříváče je nižší než 10°C	● Vyčkejte
	● Tlak na senzor, nebo poškození vnitřní podložky	● Uvolněte tlak ● Vyměňte podložku
Obtíž upevnit podložku na část těla	● Velikost nebo tvar podložky nejsou vhodné	● Vyberte vyhovující tvar a velikost podložky
Teplota podložky roste příliš pomalu	● Pokojová teplota je příliš nízká	● Nastavte okamžitý náhřev
	● Přívod energie je nedostatečný	● Vypněte přístroj
	● Podložka zahříváče byla poškozena	● Vyměňte podložku
	● Přípojka kabelu byla poškozena	● Kontaktujte prodejce

**** Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, měl by být předán do autorizované opravny. Pro bližší informace se prosím kontaktujte u prodejce.**

Krok 1



Krok 2



Krok 3



Technická specifikace

A. Ovladač

1. Velikost: 145 mm(D)/47 mm (Š)/24 mm(V)
2. Napájení: 230V AC
3. Výkon: 0 ~ 400 W
4. Teplota: pokojová teplota ~ 70°C
5. Rozlišení: 1°C
6. Přesnost: +-5 °C
7. Časovač: 01 ~ 99 minut
8. Funkce:
 - a) Nastavení teploty
 - b) Upozornění na vysokou teplotu
 - c) Zaznění alarmu pro připomínku každých 5 sekund
 - d) Připomínka vysoké teploty na displeji
 - e) LED žárovka indikující Zapnutí/Vypnutí nahřívání
 - f) Zobrazení intenzity nahřívání na displeji
 - g) Rovnoměrná kontrola rozprostření nahřívání PID
 - h) Zrychlené okamžité nahřívání
 - i) Počáteční nastavení na 40°C/30 minut

B. Zahříváč a Termosenzor

1. Teplotní parametr: Pozitivní teplotní konstanta
2. Prvek náhřevu: ohebná nahřívací podložka
3. Teplotní spínač: obnovitelný 95°C spínač
4. Termosenzor: rozlišení 1°C digitální čip IV

Technické parametry produktu

Model:	Vyhřívané podložky Home Care HT 703
Velikost produktu:	ovladač: 145 mm(D)/47 mm (Š)/24 mm(V) podložka: různá dle typu podložky
Napájení:	230V
Příkon:	0 ~ 400 W



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
 ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
 ☎ 549 245 575; 602 766 759